

マイクロカレント使用例

はじめに



マイクロカレントに設定し、「コスメジェル」をまんべんなく顔になじませてください。

リフトアップ/フェイスライントリートメント



下から上へ引き上げながらしばらく（約20秒）止めます

口元のひきしめ



頬骨と口元にそえます

口角を上げ明るい表情をつくる



頬の上下にそえます

額のトリートメント



まゆの上から上方向へゆっくり動かす

首すじのひきしめ



首のつけ根にそえます

【ご使用上の注意】


- ご使用中に肌が乾燥し、肌のすべりが悪くなってきましたら、必ずジェルをつけ足してご使用ください。（※乾燥すると、通電しにくくなる場合がございます。）
- 目、傷、化膿している部位、のど仏へのご使用は避けください。
- アトピーの方は赤みが出たり、痛くなる恐れがありますのでご使用をお避けください。（※症状が治まっている時期のご使用は可能です）
- てんかん、顔面神経痛、金属アレルギーの方はご使用をお避けください。
- 個人によって筋肉や脂肪の量、体型が異なるため、ここに示すポイント位置とは異なる場合があります。装着例は参考としてご活用ください。

首のトリートメント



首の中央から、ゆっくりとななめ上に引き上げしばらく止めます。

目スッキリトリートメント

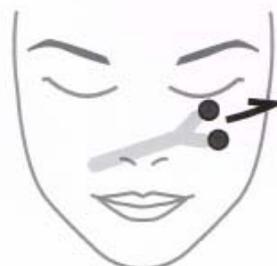

目の下を頬骨にそって横に動かす

仕上げトリートメント



軽く押さえ、気になる所を10~30秒程止めながら動かす

● 効果的な使用方法について

電気刺激を感じるか感じないかのごく弱いレベルでケアすることで効果が期待出来ます。
(※強いレベルで効果が期待できるわけではありません)
不快でない程度の心地よいレベルでご使用ください。
1日1回のご使用でも十分効果が期待できます。

● 自動終了について

タイマーにより15分で自動終了します。

● スティックのケアについて

使用后、しめらしたタオル等で拭いた後、乾いたタオル等で乾拭きしてください。
接続部に水が入りますと故障の原因になりますので水洗いはご遠慮ください。